




# GUARDAR SEGURO

Save on cost, time, and waste without compromising on your patients' safety.



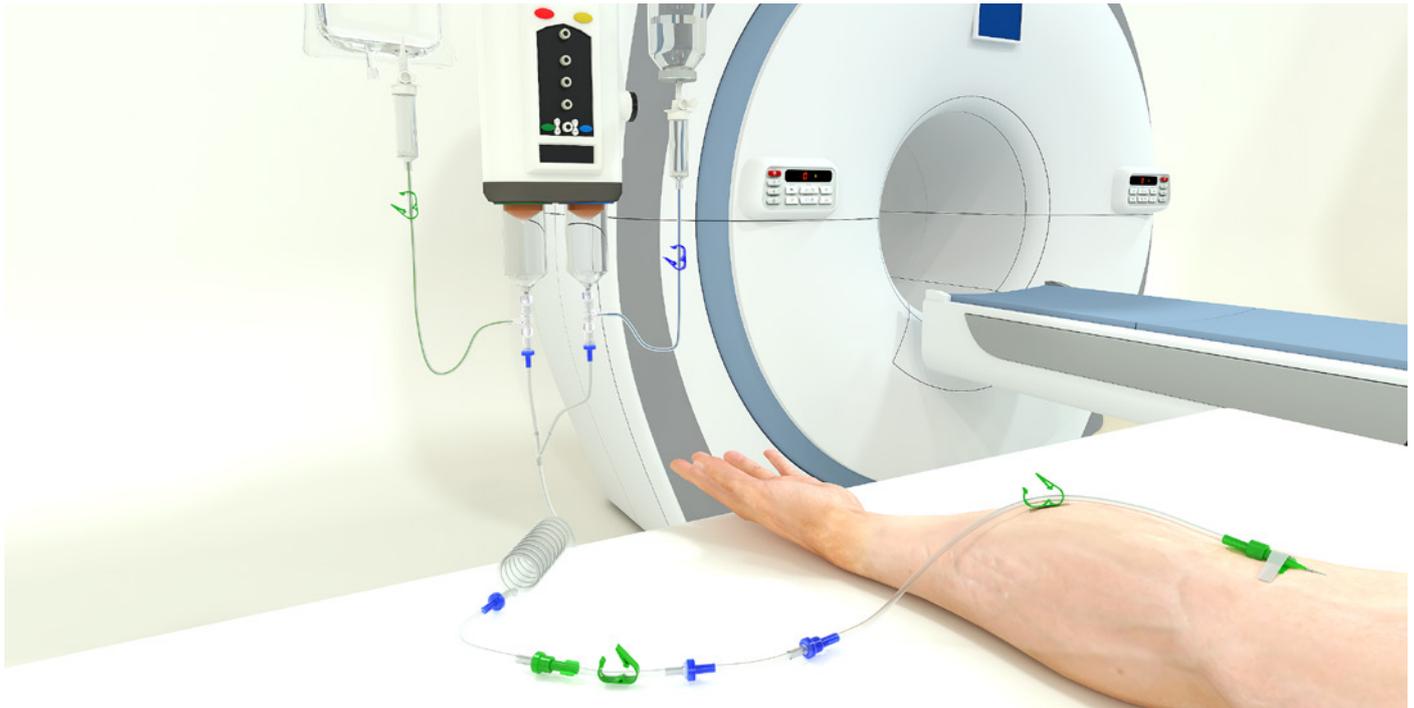

## GUARDAR

ahorre en costos, tiempo y desperdicio, gracias a nuestro diseño más eficiente

### GUARDAR COSTO



Al utilizar la parte más costosa de su sistema de infusión durante hasta 24 horas en múltiples pacientes, puede reducir los costos de material hasta en un 90% cada día.

### GUARDAR TIEMPO



Ya no es necesario reemplazar jeringas y preparar las líneas de llenado entre cada paciente. Esto le permite concentrarse en otras tareas o lograr un tiempo de rotación de pacientes más corto.

### GUARDAR DESPERDICIO



El sistema Transflux® está diseñado para garantizar la seguridad total del paciente mientras reduce el uso de materiales.

Al reutilizar la mayoría de las líneas de contraste y jeringas durante 24 horas, ahorra en medios de contraste, jeringas y líneas de llenado. La reducción de desperdicios puede ser de hasta un 90% en comparación con los sistemas de un solo uso.

## Combinación sostenible

La combinación de Transflux® y Transset® proporciona una solución eficiente, segura y rentable para la administración de medios de contraste. Ya no es necesario cambiar las jeringas de un paciente a otro. El Transflux® protege el set de llenado reutilizable, Transset®, entre pacientes. El Transset® puede usarse durante 24 horas consecutivas cuando se utiliza en combinación con Transflux® y según lo indicado en las instrucciones de uso. Solo el Transflux® debe ser cambiado de un paciente a otro. Esto hace que el sistema sea extremadamente rentable, reduce el desperdicio, ahorra tiempo y, en consecuencia, aumenta el flujo de pacientes.



## SEGURO

nuestro producto se destaca por sus características de seguridad únicas

### DESCONECTAR CARACTERÍSTICA



Nuestra característica innovadora y patentada de desconexión permite el monitoreo del reflux sanguíneo y previene la extravasare. Además, esta característica proporciona acceso continuo a la vena, asegurando una intervención rápida en caso de una reacción imprevista, permitiendo la administración inmediata de medicamentos.

### DOS VÁLVULAS DOS ZONAS DE SEGURIDAD



Cele două valve unidirecționale, separate de o zonă de interacțiune a presiunii fluidului, previn refluxul de fluide contaminate, oferind o protecție suplimentară pentru Transset® reutilizabil. Când examinarea s-a încheiat, puteți deconecta ușor pacientul de la setul de mediu de contrast, lăsând partea cu două valve pe Transset®, creând un sigiliu împotriva contaminării ambientale până la sosirea următorului pacient, care poate fi conectat la Transset®.

## Combinación más segura

Todos buscamos ser lo más eficientes posible, y ¿quién no quiere ahorrar en costos, tiempo y desperdicio? Sin embargo, al hacerlo, es esencial garantizar la seguridad tanto de sus trabajadores como de los pacientes. ¡El Transflux® y el Transset® están diseñados específicamente en torno a este principio!

Los productos de un solo uso se emplean típicamente con el control de infecciones en mente, pero añaden costos y desperdicios a sus procedimientos. Con la combinación de Transflux® y Transset®, obtienes lo mejor de ambos mundos: la parte más grande y costosa es reutilizable, mientras que la parte más pequeña y económica del sistema es desechable, reduciendo tanto el costo como el desperdicio. La parte de un solo uso, el Transflux®, protege a la parte reutilizable, el Transset®, de los riesgos de contaminación cruzada. Además, el Transflux® actúa como un capuchón de protección ambiental para el Transset® entre pacientes, reduciendo aún más el riesgo de infecciones. Varios estudios demuestran que el Transflux® y el Transset® son seguros de usar, sin casos de contaminación cruzada o contaminación ambiental durante el uso de 24 horas.

# Transflux® & Transset®

la combinación más segura



**P&R MEDICAL BV**

Wetenschappark 5

3590 Diepenbeek, Bélgica

+32 (0)11 23 46 82

info@trans-flux.com

[www.trans-flux.com](http://www.trans-flux.com)

Síguenos en las redes sociales

